


# シリンジ入り製品使用方法

1 セキュリティバンドをとり、鉛容器の蓋をはずします。

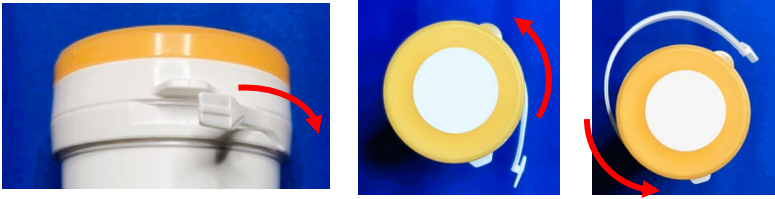


! セキュリティバンドを上方向に引っ張らないでください


2 シリンジが鉛容器に入ったままの状態です。プランジャーロッドをねじ込み、プランジャーロッドを持って鉛容器から取り出します。



3 シリンジの先端のゴムキャップをはずし、検査に応じて両頭針/ルアーコネクション/針付活栓を取り付けます。両頭針は短い方をシリンジに取り付けます。このとき、長針側先端のカット面が投与時に上を向くように取り付けてください。

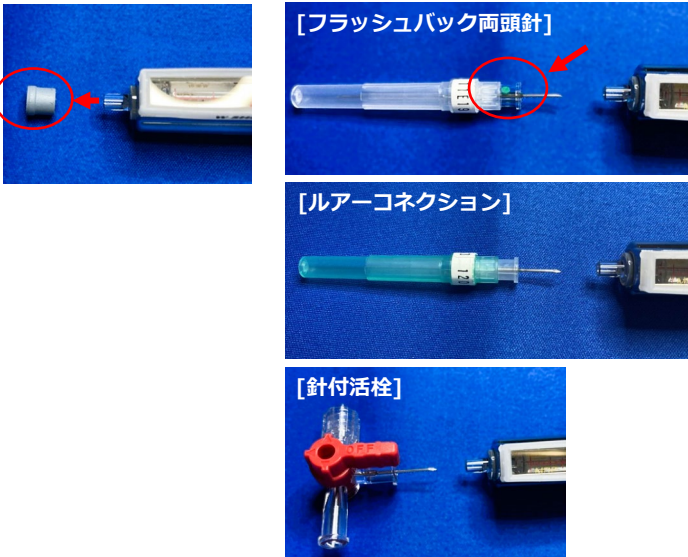

緑色のマークが長針側先端のカット面と一致しています。

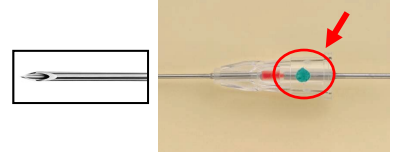

! 両頭針等を取りつける際、プランジャーロッドを押さないようにして下さい。

4 患者さんに投与します。



! シリンジ中にごくわずかに気泡が含まれている場合があります。注射液を投与してもこの気泡は通常シリンジ内に残りますが、誤って投与することのないよう、気泡の位置に注意しながら投与して下さい。

## 【廃棄の方法】

両頭針、ルアーコネクションにカバーをつけた後、針をはずします。次にプランジャーロッドを取りつけた時と逆の方向に回し、取りはずします。フランジキャップを回して取りはずし、シールドからシリンジを抜き取り廃棄します。